



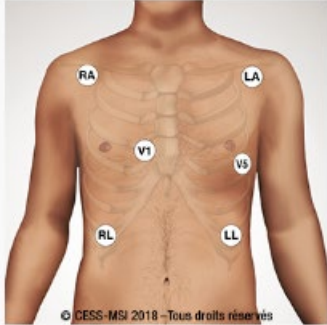
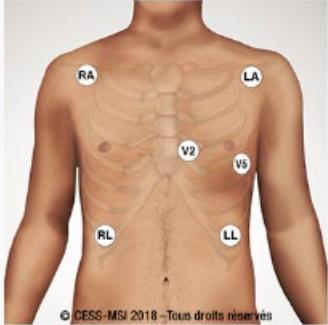
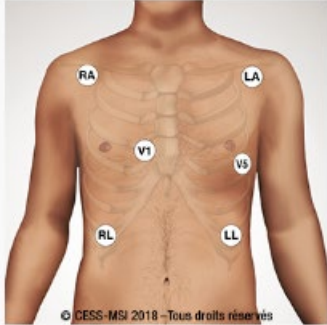
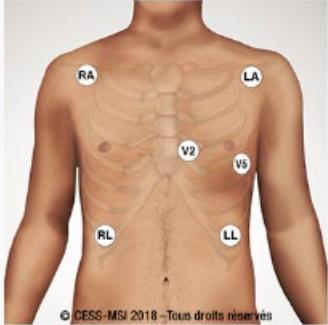
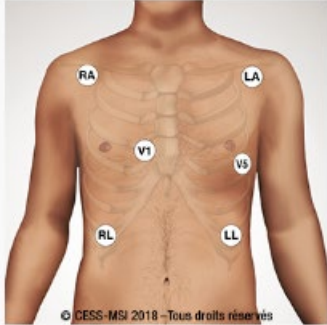
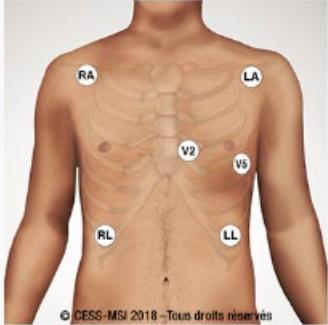
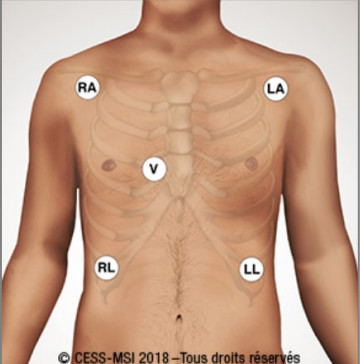
Activités dérèglementées par des aides-soignants Installation et retrait d'un système de monitoring cardiaque

Pour plus de détails concernant les activités dérèglementées ci-dessous,
consulter les *Méthodes de soins informatisées (MSI)*

Préparer l'utilisateur (procédure abrégée)		Fait
Procéder à la double identification de l'utilisateur		<input type="checkbox"/>
Procéder à l'hygiène des mains		<input type="checkbox"/>
Expliquer la procédure à l'utilisateur et obtenir son consentement verbal		<input type="checkbox"/>
Informer l'utilisateur concernant les limites de la mobilité engendrées par le monitoring cardiaque <ul style="list-style-type: none"> • Télémétrie : limitée selon le périmètre maximal permettant de capter les données. • Moniteur cardiaque : limitée à la longueur des fils et selon l'état clinique de l'utilisateur 		<input type="checkbox"/>
Demander à l'utilisateur si l'infirmière lui a fourni les informations concernant l'importance de signaler la présence de symptômes (ex. : palpitations, douleur sternale, étourdissements, faiblesse). Dans le cas contraire, aviser l'infirmière		<input type="checkbox"/>
Installer l'utilisateur en position couchée au centre du lit ou en position semi-assise		<input type="checkbox"/>
Préparer la peau où seront appliquées les électrodes (assécher et retirer les poils avec une tondeuse électrique au besoin)		<input type="checkbox"/>
Préparer le matériel (procédure abrégée)		
Procéder à l'hygiène des mains		<input type="checkbox"/>
Nettoyer ou désinfecter la surface de travail		<input type="checkbox"/>
Télémétrie <ul style="list-style-type: none"> • Insérer une nouvelle pile dans l'émetteur • Appuyer sur le bouton test si présent • Vérifier que le câble de l'appareil est bien connecté au boîtier de la télémétrie • Vérifier que le câble de l'appareil et que les fils conducteurs ne présentent pas d'effilochage, de décoloration ou de bris • Préparer le nombre approprié d'électrodes • Ajouter le gel conducteur au besoin 	 <p>Source : https://www.anandic.com/fr/produits-solutions/monitorage-patient/carescape-monitorage-modulaire/carescape-apex-pro-telemetrie</p>	<input type="checkbox"/>
Moniteur cardiaque <ul style="list-style-type: none"> • Installer le moniteur cardiaque le plus près possible de l'utilisateur le cas échéant • Vérifier que le câble et que les fils conducteurs sont bien liés à l'écran du moniteur cardiaque • Mettre le moniteur cardiaque en marche • Préparer le nombre approprié d'électrodes • Ajouter du gel conducteur, au besoin 	 <p>Source : https://discountcardiology.com/Spacelabs-Ultraview-SL2400.html</p>	<input type="checkbox"/>

Activités dérèglementées par des aides-soignants

Installation et retrait d'un système de monitoring cardiaque

Installation des électrodes (procédure abrégée)		Fait				
Procéder à l'hygiène des mains		<input type="checkbox"/>				
Appliquer les électrodes aux sites appropriés ainsi que le nombre recommandé selon le dispositif de monitoring cardiaque utilisé		<input type="checkbox"/>				
<p>Télémetrie</p> <ul style="list-style-type: none"> Positionner les électrodes RA, LA, RL, LL avec soit V1 et V5 ou V2 et V5 Connecter les fils conducteurs aux électrodes Ranger le boîtier dans la pochette de transport de l'utilisateur Demander à un professionnel habilité de confirmer la qualité de la transmission des impulsions électriques selon les différents points de vue 	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">V1 et V5</td> <td style="width: 50%;">V2 et V5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	V1 et V5	V2 et V5			<input type="checkbox"/>
V1 et V5	V2 et V5					
						
<p>Moniteur cardiaque</p> <ul style="list-style-type: none"> Positionner les électrodes RA, LA, RL, LL et V Connecter les fils conducteurs aux électrodes Vérifier l'apparition d'un tracé cardiaque sur l'écran du moniteur cardiaque Réduire la tension sur les fils afin d'éviter toute déconnexion accidentelle Demander à un professionnel habilité de confirmer la qualité de la transmission des impulsions électriques selon les différents points de vue 		<input type="checkbox"/>				
Retrait des électrodes (procédure abrégée)						
Informier le professionnel assigné à la console centralisée du retrait du monitoring cardiaque, le cas échéant		<input type="checkbox"/>				
Procéder à la double identification de l'utilisateur		<input type="checkbox"/>				
Procéder à l'hygiène des mains		<input type="checkbox"/>				
<ul style="list-style-type: none"> Télémetrie : Retirer la pile de l'émetteur Moniteur cardiaque : Fermer le moniteur cardiaque 		<input type="checkbox"/>				
Débrancher les câbles des électrodes		<input type="checkbox"/>				
Retirer les électrodes délicatement de l'utilisateur et les jeter		<input type="checkbox"/>				
Nettoyer l'excédent de gel sur la peau de l'utilisateur		<input type="checkbox"/>				
Disposer du matériel selon la procédure de l'établissement		<input type="checkbox"/>				
Procéder à l'hygiène des mains		<input type="checkbox"/>				